

Mesas de Cirugía

**INN BIO**  
INNOVACIÓN BIOMEDICA S.A.S.

mesas de cirugía

de  
cirugía



## ➤ NOT-5600SK(F)-07

Mesa electrohidráulica

Sistema Electrohidráulico integrado.

Fabricada en acero inoxidable.

Radio traslúcido para toma de RX.

Proporciona movimiento longitudinal para la toma de RX con arco en C.

Para cirugías en general y aplicaciones específicas.

Ortopedia Opcional.

### Especificaciones Técnicas

#### Radio traslucida

Permite la toma de rayos X, permite la inserción de cintas de X-Ray, en la cabeza, los pies o ambos lados de una gama completa (de pies a cabeza) para diferentes ángulos de exposición

La mesa de operaciones NOT 3600SKF está diseñada para posicionar con eficacia a los pacientes, facilitar el acceso y control de cualquiera de los equipos quirúrgicos o Arco en C y garantizar la seguridad y comodidad del paciente. Para satisfacer sus necesidades de productividad, facilidad de uso, facilidad de mantenimiento y fiabilidad a largo plazo y durabilidad, estos nuevos modelos se crean para cumplir con esta misión en la más atractiva relación entre precio-rendimiento.

#### Control de Mano

Suavemente y con precisión alcanza las posiciones deseadas.

#### Columna Unica

Se puede colocar la mesa en la posición deseada y la posición de inclinación de Trendelenburg lateral puede lograrse efectivamente.

#### Tabla forma de T



Facilita el acceso fácil del equipo quirúrgico y la estabilidad de la tabla.



Las mesas quirúrgicas están diseñadas para lograr funcionalista de usos múltiples. Eléctrica con funciones accionadas hidráulicamente operada a través de control manual, control de pie opcional, o control auxiliar opcional. El marco de la mesa está hecha de aluminio fundido con base resistente al desgaste y las cubiertas de columna son de acero inoxidable para proporcionar resistente a impacto, rotura y desinfectante.

#### Pierneras divididas y desmontables

Permite la colocación horizontal o vertical ajustable de las piernas

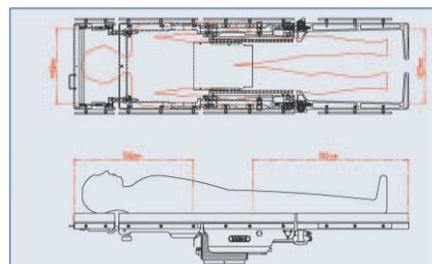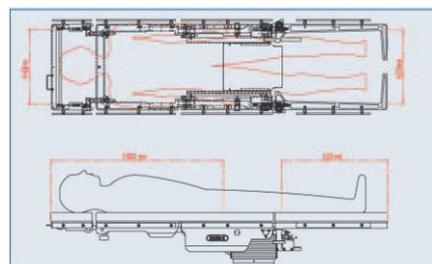

#### Mesa con desplazamiento longitudinal

Desplazamiento longitudinal de 300 mm y radiotransparente simplificando el acceso de Brazo, teniendo cobertura completa de imágenes sin mover al paciente. (5600S/SK/SKF solamente)



#### Mecanismo de bloqueo central de piso

Fija la mesa Fácil y firmemente en su lugar con el control de pedal.

#### Ruedas giratorias

Proporcionar una buena movilidad.

#### La Mesa NOT 5600SKF consta de:

**Reposacabezas** - se puede subir, bajar y quitar manualmente.

**Plancha trasera** - se puede subir y bajar electro-hidráulica.

**Puente de riñón** - se puede subir y bajar manualmente. (5600SK/SKF solamente)

**Asiento de la placa** - controles mesa Trendelenburg, Trendelenburg inverso, y la inclinación lateral.

**Las placas de la pierna** - se puede subir, bajar, horizontal. Colocado y retirado manualmente.

**Extensión de dispositivos ortopédicos** - el doble de las articulaciones lograr un posicionamiento óptimo. (5600SF/SKF solamente)

**Sección piernas** - 2 opciones, de una sola pieza o de dos piezas (división) de diseño, plegable y desmontable sistemas a través del resorte de gas.


# NOT-5600SK(F)-07 ◀

## Especificaciones Técnicas

### Especificaciones:

longitud de la mesa (incluyendo cabecera)	1.960mm
Ancho de la mesa (con rieles laterales)	500 mm (19.7")
Alto de la mesa (arriba/abajo)	710 -1.015mm / 740 - 1.070mm
Cabecera (arriba/abajo)	60°/90°
Braceras (arriba/abajo)	90°/5°
Pierner as (arriba/abajo)	15°/90°
Pierner as (posicion horizontal)	0°-90°
Trendelenburg / trendelenburg inverso	26°/26°
inclinacion Lateral (izq/der)	21°/21°
Flexion/deflexion	220°/100°
Máximo peso de paciente	150Kg
Movimiento Longitudinal	300mm

### VERSATILIDAD

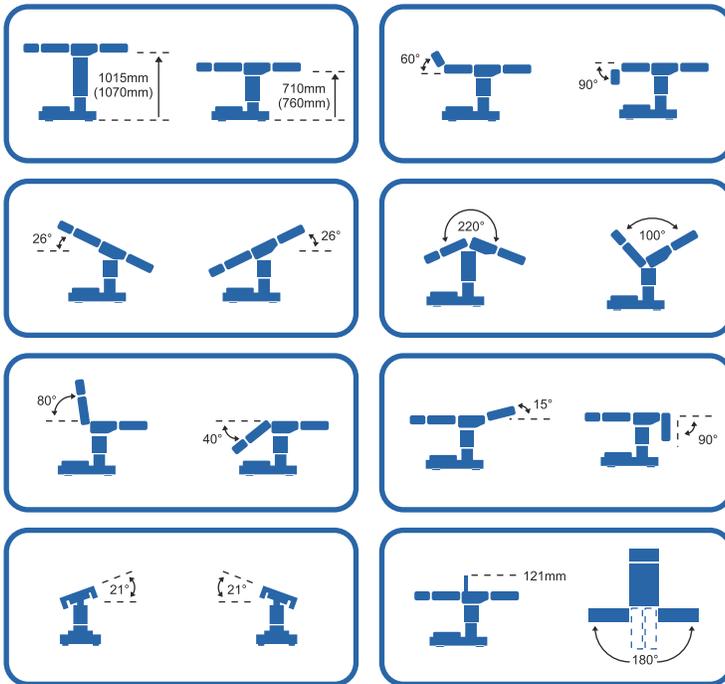

### APLICACIONES

- Cirugía General
- Cardiovascular
- Oftalmológica, facial, plástica
- Neurocirugía, craneotomía
- Cirugía de riñón, vesicular
- Columna
- Urología
- Cirugía de hombro o de rodilla
- E.N.T

Alguna de estas aplicaciones solicitan accesorios adicionales.